



DESCRIZIONE DELLALENTE

Nome commerciale PMMA CHERATOCONO

Tipologia di lente RIGIDA

Indicazione di uso correzione Cheratocono

Confezione 1 lente in Vial immersa in soluzione disinfettante con superfici trattate al Plasma

Sistema di produzione Tornitura Computerizzata

Materiale poli-MMA + coloranti

Dk 0

Angolo di Contatto 22°

Spessore 0.15 (-3.00)

Geometria Tricurva

Raggio Base da 4.8o a 8.00 (step 0.05mm)

Diametro da 8.00 a 12.00 (step 0.1mm)

Potere Sferico da +35.00 a -35.00dt (step di 0.25dt)


Gamma colore Neutro, Verde, Grigio, Marrone

Tabella applicativa consigliata


Nei casi di cheratocono non esiste una tabella applicativa per la scelta della lente, solo l'uso del set di prova e della valutazione in fluoresceina può determinare la lente più idonea da applicare

Esempi di esami in fluoresceina


Lente giusta

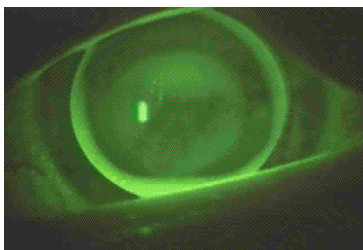

Lente stretta

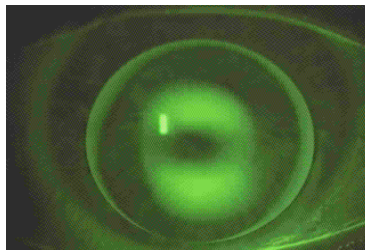

Lente piatta

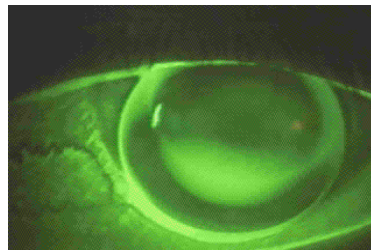

Manutenzione consigliata

Soleko Salina per il risciacquo, Soleko Conditionar R per la conservazione e disinfezione, Soleko Cleaner R per la pulizia quotidiana, Soleko I Fresh per umettare e lubrificare.